

MATRIX MTA+



Матриця для МТА+

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ


ПРИЗНАЧЕННЯ:

Матриця Matrix MTA+ використовується для формування аплікаційної дози матеріалу МТА+ перед внесенням у порожнину або канал.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Підготувати матеріал МТА+ згідно з інструкцією по застосуванню виробника, що додається до препарату МТА+. На кожній із стінок матриці Matrix MTA+ знаходяться порожнини з заданим діаметром від 0,7 мм до 1,0 мм. Підготовлений матеріал необхідно розмістити на стінці матриці таким чином, щоб він заповнив всю обрану порожнину. З допомогою обраного стерильного інструменту зняти сформований матеріал з матриці.

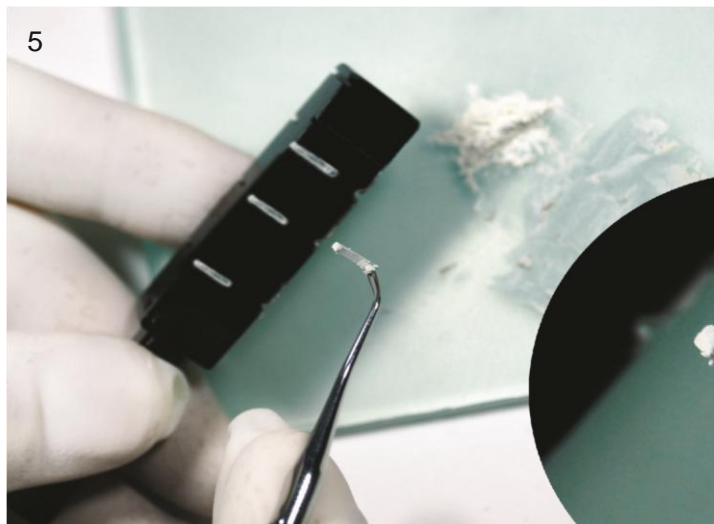

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

Не залишайте матеріалу в матриці, слід використовувати підготовлений матеріал протягом 10 хвилин.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Дотримуйтесь вимог, що наведені в керівництві з використання препарату МТА+.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в недоступному для дітей місці.

ПОВОДЖЕННЯ З ПРОДУКТОМ:

Перед використанням: протріть ізопропиловим або етиловим спиртом.

Після використання: видалити залишки матеріалу МТА+ з допомогою щітки і води з миючим засобом.

Протерти MATRIX ізопропиловим або етиловим спиртом.

Стерилізація виробу при 121°C у паровому циклі, не впливає на зміну його фізичних характеристик (форма, розмір).



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ



CERKAMED Войцех Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

| | |
|---|--|
| Уповноважений представник в Україні та адреса: | Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ» |
|  | вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua |