



ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ І АПЛІКАЦІЇ МТА+ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ ПРОДУКТ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЯМИ- СТОМАТОЛОГАМИ

СЄ

ВИРІБ НЕСТЕРИЛЬНИЙ - СТЕРИЛІЗУВАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Інструменти стоматологічні багаторазового використання для внесення і аплікації дози змішаного матеріалу МТА+. Інструменти виготовлені з нержавіючої сталі стійкою до корозії, з високою міцністю на розтягнення, (вигин, стиск), вміст вуглецю у сплаві мін. 0,15 %.



ОПИС КОМПЛЕКТУ

MX1- кінцівка для переносу цементу МТА+ з матриці Matrix до опрацьованого каналу, при закритті перфорації, при зворотному виконанні в задніх зубах.

MX2 – Закінчення для переносу цементу МТА+ з матриці Matrix до опрацьованого каналу у випадку закритті перфорації, при зворотному виконанні в передніх зубах.

MX3- Закінчення для аплікації цементу МТА+ у випадку закриття перфорації, зворотнього виконання, для конденсації, вигладжування нанесеного цементу в передніх зубах.

MX4- Закінчення для аплікації цементу МТА+ у випадку закриття перфорації, зворотнього виконання, для конденсації, вигладжування нанесеного цементу в задніх зубах.

ПОВОДЖЕННЯ З ІНСТРУМЕНТАМИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

У процесі виробництва застосовуються процедури, спрямовані на забезпечення стійкості до корозії, але міцність інструментів залежить від правильної експлуатації і технічного обслуговування.

Очищення, полоскання і миття

Інструменти поставляються нестерильні. Новий інструмент перед першою стерилізацією, після вилучення з упаковки необхідно ретельно вимити в теплій воді з додаванням миючого засобу.

Щоразу перед використанням у іншого пацієнта інструменти повинні бути піддані стерилізації.

Стерилізація

Всі інструменти (багаторазові) повинні бути продезінфіковані, промиті для видалення дезінфекційного засобу і осушені, перш ніж будуть піддані стерилізації. Особливо рекомендується мити ультразвуком, як це найбільш ефективний і продуктивний метод.

Рекомендовані методи стерилізації:

Метод	Рекомендована температура і час
Паровий автоклав	121°C, на 20 хвилин
Сухе повітря	160°C, від 60 до 120 хвилин
Хімічна пара	132°C, на 20 хвилин

Серійний номер виробу зазначено на упаковці.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ



Замішаний до консистенції мокрого піску цемент МТА+ внести в обраний отвір матриці Matrix МТА+. За допомогою обраної насадки витягти зформовану порцію матеріалу та внести.



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зверніться до інформації, що міститься в інструкції з використання продукту МТА+ і порад про очищення та стерилізації інструментів.

ЗБЕРІГАННЯ

Інструменти зберігати при температурі 5-30°С і відносній вологості повітря не більше 70%.

Щоразу перед використанням інструменту перевірте на наявність забруднень, пошкоджень структури

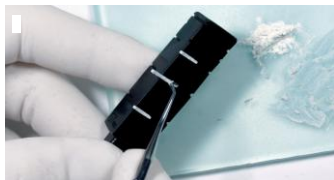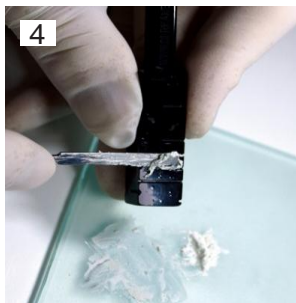

матеріалу (тріщини, викривлення, розлом, відшарування).

Недотримання перерахованих вище правил значно знижує термін служби інструменту і скорочує час його використання.



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ



PPH CERKAMED Войцех Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковского, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

**Уповноважений
представник в
Україні та адреса:**

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІВОДЕНТ»

вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua



Дата останнього оновлення: 14.03.2014/3